

SPECIALFREMSTILLEDE HJÆLPEMIDLER



HMN



INFO

- Alle standard produkter i vores sortiment er CE mærkede efter MD regulationen for medicinsk udstyr - 2017/745/EU.
- Hvis vi laver tilpasninger på et standardprodukt, vil CE mærkningen bortfalde. Den vil blive erstattet af vores SMP- nummer (Special Made Product). Dette er muligt ved produkter der tilpasses til en enkelt bruger.



INFO

Om der er tale om mindre ændringer som at hæve et armlæn 5 cm, eller om der skal udvikles et helt nyt produkt, kommer an på brugerens behov. I samarbejde med terapeuten finder vi frem til den bedste løsning i det givne tilfælde og kommer med et eller flere løsningsforslag.

Vi går derefter i gang med at tilrette eller fremstille løsningen. Dette foregår manuelt i vores produktion i Brøndby, hvor vi har specielt uddannede smede til at foretage ændringerne. Før løsningen bliver færdiggjort, bliver den eventuelt afprøvet hos brugeren sammen med en af vore konsulenter og terapeuten.

Her afgøres det om produktet er som det skal være, eller om der skal foretages små justeringer. Først herefter vil produktet blive færdiggjort, lakeret og leveret.

På de følgende sider kan du se, hvordan processen omkring fremstilling af et specielt lavet hjælpemiddel foregår, samt eksempler på løsninger vi har lavet i den seneste tid. Som du kan se, kan stort set alt lade sig gøre.


Er du i tvivl om hvorvidt et specialfremstillet produkt er noget for dig, så kontakt en af vore konsulenter for råd og vejledning.



SÅDAN FOREGÅR PROCESSEN MED FREMSTILLING AF SPECIELLE PRODUKTER

1.


En terapeut står med et problem, der muligvis ikke er løsbart med standard produkter og kontakter en af vores konsulenter.

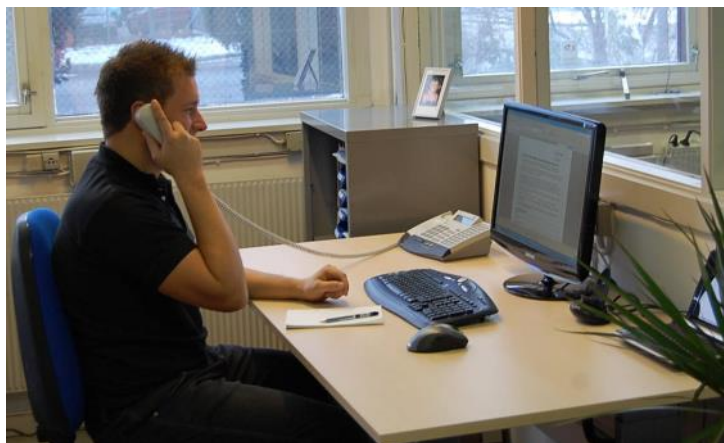

2.

Ved et møde hos brugeren, bliver forskellige produkter afprøvet og det aftales, hvad der skal ske af ændringer. Brugeren, terapeut og konsulent drøfter sammen mulige løsninger, så alle parter er enige om, hvad der skal ske med produktet.



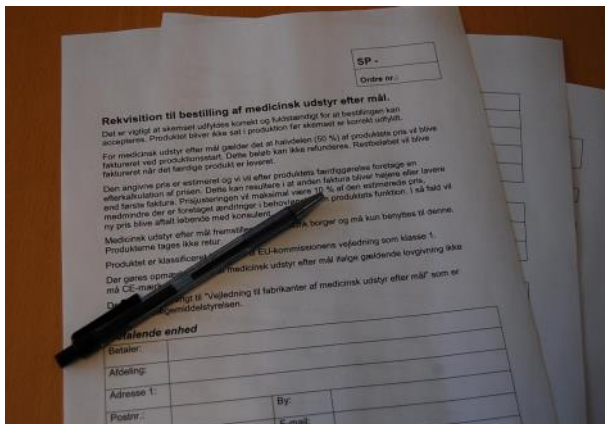

3.

Der udfærdiges et specielt produktskema, hvor opgaven beskrives. Her tages der også højde for eventuelle risici. Et sådan skema skal udfærdiges ifølge EU lovgivningen.

Speciallavede produkter har intet HMI-nummer, da de fremstilles til én specifik bruger. I dette skema gives der tilbud på opgaven med pris og leveringstid. Først herefter beslutter terapeuten, om produktet skal sættes i produktion.



4.

Konsulent og produktionsmedarbejder udvikler i samarbejde produktet med henblik på brugers situation. Produkterne bliver fremstillet fra grunden og kan derfor formes 100 % efter bruger.

SÅDAN FOREGÅR PROCESSEN MED FREMSTILLING AF SPECIELLE PRODUKTER

5.

Sammen med terapeuten bliver produktet evt. mellemafprøvet hos brugeren. Her bliver det kontrolleret at alt er som aftalt og om produktet passer til brugerens behov.



6.

Efter mellemafprøvningen er det stadig muligt at foretage mindre ændringer på produktet før dette fuldsvejses og lakeres.



7.

Det færdige produkt er klar til levering til forhåbentlig stor glæde for både bruger og terapeut.



EKSEMPLER PÅ PRODUKTER VI HAR FREMSTILLET



Stolen til venstre er en M2 El-Tip, hvor der er arbejdet meget med siddestillingen. Der er lavet et specialsæde med skålform, specialsidestøtte og polstret ryg samt en abduktionsklods.

Borger havde behov for en særlig tilpasset siddestilling, selv i forbindelse med toiletbesøg, ellers havde han for mange smerter til at kunne bruge en toiletstol.

Siddestillingen her er et godt eksempel på, at vi har stor erfaring med at tilpasse siddestillingerne på vores stole.



Stolen er en M2 Multi-Tip. Der er monteret et skalstøb på stolen og det øvrige tilbehør er tilpasset til skallen. Vi har stor erfaring med at montere skalstøb på vores stole og efterfølgende tilpasse resten af stolen, så skallen bliver udnyttet bedst muligt.



Borgers arm faldt ud af et standard hemiplegi armlæn, så der blev udviklet et armlæn med dybere hemi skål og med et greb fortil.

EKSEMPLER PÅ PRODUKTER VI HAR FREMSTILLET

M2 Multi-Tip hvor det negative tip er gjort større end normalt, for at hjælpe borgeren med at komme ind og ud af stolen nemmere. Derfor er stolen forsynet med støttehåndtag.



På de elevérbare fodstøtter til højre, har vi tilpasset dybden på lægstøtterne og lavet en speciel polstring til fodpladerne. Borgeren havde behov for meget understøttelse af sine ben og trykaflastning under fødderne.



Borger rokker frem og tilbage og sætter stolen i bevægelse hen over gulvet og ødelægger toilettet. Der er monteret 4 x 8 kg vægtlodder på hver side af stolen. Stellet er gjort 10 cm bredere fornden, der er lavet en helplade med ankelbespænding og der er på svejset øjer/beslag til montering af seler. Armlænsputer bagpå for at beskytte væg og toilet.



EKSEMPLER PÅ PRODUKTER VI HAR FREMSTILLET



Borger havde behov for en badebænk med hjul. Stolens understel er et M2 Standard, hvor der så er monteret Neptun ryg og armlæn på. Der er lavet et special sæde uden hul som er fastmonteret. Fodstøtterne er vinklet så de kommer helt ind til stellet.



Borger rammer sæde og grinder ved gang, så grinder er blevet fjernet og der er lavet forstærkninger mellem bøjlen og stangen for at gøre rollatoren mere solid.



Stolen til venstre er en M2 Multi-Tip. Den er forstærket til 250 kg, gjort bredere og fået monteret vandtætte motoriserede hjul og joystick. Denne stol opfylder flere krav, både fra borgers og personalets side. Arbejdsmiljøet er blevet betydeligt forbedret med højdejusteringen og joystick-funktionen.

Borger var for stor til, at en enkelt plejer kunne skubbe ham. Desuden er sædet lavet trykaflastende og siddestillingen er optimeret i forhold til borgers funktionsniveau. Stolens motoriserede hjul er placeret centralt for bedre køreegenskaber. Denne stol er et godt eksempel på, at alt er muligt samt at der er mange muligheder med ny teknologi.

EKSEMPLER PÅ PRODUKTER VI HAR FREMSTILLET

Sædet her til højre er designet med et mindre hul, indbygget abduktionsklods og en indbygget urinfanger. Sædet er lavet til en borger, der ikke har kræfter nok i sine ben, så det er nødvendigt med denne klods til at adskille dem.



Toiletstolen til højre er en M2 Multi-Tip. Stolen er designet med et todelt sæde, så der er hul både foran og bagtil. Sædet er lavet til en borger, der havde brug for at kunne komme til både foran og bagtil ved bad og toiletbesøg.



Stolen til højre er en M2 Standard med skubbehåndtag. På stolen er der monteret store sidestøtter nede ved hofterne. Sidestøtterne er lavet til en borger, der havde brug for at støtte sig ved lårene, så han ikke kunne falde ud til siden.



EKSEMPLER PÅ PRODUKTER VI HAR FREMSTILLET



Denne rollator er en specialombygget Carl Oscar. Sædehøjden og håndtagshøjden er mindsket betydeligt. Der er samtidigt lavet et system, så rollatoren stadig kan klappes sammen og eksempelvis medbringes i en bil. Borger er dværg og havde behov for en rollator, der var tilpasset til hans størrelse og funktionsniveau. Samtidigt var der nogle meget konkrete krav til støtte og fleksibilitet i forhold til transport.



Stolen er tilpasset en borger som havde behov for at være fastspændt til stolen under toiletbesøg. Stolen fastgøres til væggen, da borgers bevægelser flytter på hele stolen under toiletbesøg. Der er monteret et bord på arm-lænene, da borger piller ved alting. Bordpladen slutter helt tæt til kroppen, så borgeren ikke kan få sine hænder ned under bordpladen.



Borger har brug for selvstændigt at køre stolen over et væghængt toilet. Stolen afkortes bagtil og der er monteret et specielt sæde med udskæring til højre side.



V 1.2 28-07-2023